

UBGEN[®] SHELTER[®] MEMBRANA IN PERICARDIO BOVINO



SHELTER®

La membrana in pericardio bovino

- Progettata per la chirurgia ossea in odontoiatria con diversi spessori
- Estremamente resistente alla trazione, suturabile e fissabile con chiodini
- Prodotta da filiera interamente italiana, certificata e controllata (CE 0373), tramite processo di decellularizzazione standardizzato

1. CARATTERISTICHE

BIOCOMPATIBILITÀ

Test eseguiti in conformità alle linee guida ISO 10993-5:2009 hanno dimostrato che le membrane SHELTER® hanno comprovate proprietà di biocompatibilità oltre a essere totalmente prive di elementi esogeni o citotossici.

STERILITÀ

È un dispositivo monouso, sterilizzato a raggi γ , con stabilità a 5 anni.

RIASSORBIMENTO

SHELTER® FAST - riassorbimento naturale (4-5 settimane)


SHELTER® SLOW - cross-linkata a riassorbimento lento (4-6 mesi) con effetto barriera prolungato

2. BENEFICI

- Maneggevolezza clinica e semplicità di applicazione
- Resistenza alla trazione
- Supporta l'angiogenesi
- Capacità chemiotattica
- Il pericardio bovino agisce come barriera naturale

3. APPLICAZIONI CLINICHE

- Mantenimento dell'alveolo e della cresta ossea
- Chirurgia di rialzo del seno mascellare
- Aumento orizzontale e verticale in difetti a 2 pareti
- Deiscenze e fenestrazioni nelle lesioni perimplantari
- Rigenerazione parodontale nei difetti infraossei e difetti di forcazione a 2-3 pareti

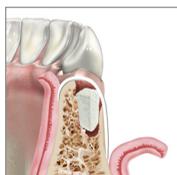

PRODOTTO	CONFEZIONE	CODICE
SHELTER® F	Membrana in pericardio 15x20x0,2 mm	BMF04A
	Membrana in pericardio 30x25x0,2 mm	BMF04B
	Membrana in pericardio 50x30x0,2 mm	BMF04C
	Membrana in pericardio 15x20x0,4 mm	BMF04D
	Membrana in pericardio 30x25x0,4 mm	BMF04E
	Membrana in pericardio 50x30x0,4 mm	BMF04F
	Membrana in pericardio 15x20x0,8 mm	BMF04G
	Membrana in pericardio 30x25x0,8 mm	BMF04H
	Membrana in pericardio 50x30x0,8 mm	BMF04I
	Membrana in pericardio 15x20x1 mm	BMF04J
	Membrana in pericardio 30x25x1 mm	BMF04K
	Membrana in pericardio 50x30x1 mm	BMF04L
SHELTER® S	Membrana in pericardio 15x20x0,2 mm	BMS05A
	Membrana in pericardio 30x25x0,2 mm	BMS05B
	Membrana in pericardio 50x30x0,2 mm	BMS05C
	Membrana in pericardio 15x20x0,4 mm	BMS05D
	Membrana in pericardio 30x25x0,4 mm	BMS05E
	Membrana in pericardio 50x30x0,4 mm	BMS05F
	Membrana in pericardio 15x20x0,8 mm	BMS05G
	Membrana in pericardio 30x25x0,8 mm	BMS05H
	Membrana in pericardio 50x30x0,8 mm	BMS05I
	Membrana in pericardio 15x20x1 mm	BMF05J
	Membrana in pericardio 30x25x1 mm	BMF05K
	Membrana in pericardio 50x30x1 mm	BMF05L

SHELTER[®] PERCHÉ SCEGLIERLA?

Per la sua estrema maneggevolezza e resistenza.

La membrana è essenziale per stabilizzare e proteggere il biomateriale innestato.

Per il 90% degli interventi sono indicate le membrane riassorbibili, mentre per il restante 10%, in cui è necessario un effetto barriera prolungato, si usano generalmente quelle non riassorbibili, che necessitano però di un secondo intervento per la loro rimozione.

Per questo motivo, UBGEN[®] ha realizzato anche una variante di membrana riassorbibile con effetto barriera a lungo termine, senza dubbio la migliore soluzione per il paziente, che evita così lo stress del doppio intervento.

SOLUZIONI

- Versione SHELTER[®] FAST con effetto barriera naturale di 4-5 settimane
- Versione SHELTER[®] SLOW con effetto barriera a lungo termine, 4-6 mesi

Viale del Lavoro, 14
35010 Vigonza (PD) Italy
T +39 049 628630
info@ubgen.com
ubgen.com

CONSULTA LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
UBGEN.COM

RICHIEDI UNA COPIA
DEL NOSTRO BOOK SCIENTIFICO
CON I CASI CLINICI
MARKETING@UBGEN.COM

